



Silk'n®

DUAL LED MASK
FAC04

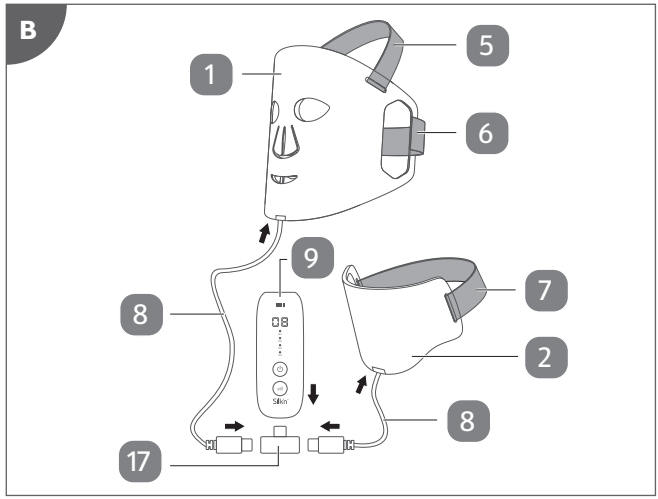

RS KORISNIČKO UPUTSTVO

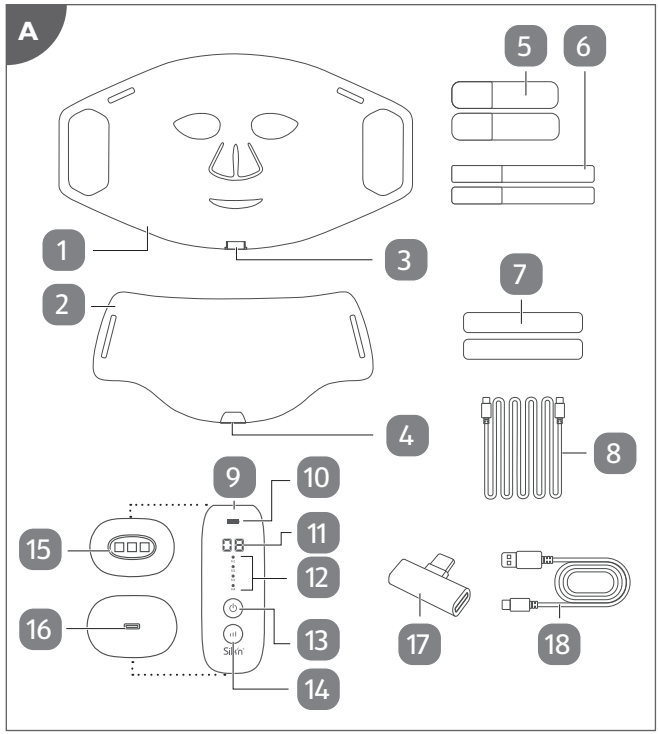

Pravne napomene

Pravni napomene Invention Works B.V. zadržava pravo da izvrši promene svojih proizvoda ili specifikacija radi poboljšanja performansi, pouzdanosti ili mogućnosti proizvodnje. Informacije koje pruža Invention Works B.V. smatraju se tačnim i pouzdanim u trenutku objavljivanja. Međutim, Invention Works B.V. ne preuzima odgovornost za njihovu upotrebu. Nema nikakve licence koja se odaje impliciranim ili na drugi način u okviru bilo kojeg patenta ili patentnih prava Invention Works B.V.

Nijedan deo ovog dokumenta ne može se reprodukovati ili preneti u bilo kom obliku ili putem bilo kog sredstva, elektronskog ili mehaničkog, za bilo koju svrhu, bez izričitog pismenog odobrenja Invention Works B.V. Podaci su podložni promenama bez prethodne najave.

Silkn Beauty Ltd. ima patente i patentne prijave u toku, zaštitne znakove, autorska prava ili druga prava intelektualne svojine koja pokrivaju predmetne materijale u ovom dokumentu. Dostavljanje ovog dokumenta ne daje vam nikakvu licencu za ove patente, zaštitne znakove, autorska prava ili druga prava intelektualne svojine, osim onog što je izričito navedeno u bilo kakvom pismenom ugovoru sa Silkn Beauty Ltd. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

Silk'n i logo Silk'n su registrovani zaštitni znakovi Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandija
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Šta je u paketu/delovi uređaja	5
Opšte informacije	5
2.1 Čitanje i čuvanje priručnika	5
2.2 Objašnjenje simbola	6
Bezbednost	6
3.1 Pri pravilnoj upotrebi	6
3.2 Uputstva za bezbednost	6
Provera proizvoda i sadržaja paketa	9
Punjenje	10
Sastavljanje	10
Operacija	11
7.1 Priprema	11
7.2 Izvođenje sesije	12
Regimen	12
Čišćenje	13
Skladištenje	13
Rešavanje problema	13
Tehnički podaci	14
Odlaganje	14
13.1 Odlaganje ambalaže	14
13.2 Odlaganje proizvoda	14
Garancija	15
Klijent servis	15

1. Šta je u paketu/delovi uređaja

Maska za lice
 Maska za vrat
 Konektor maske za lice
 Konektor maske za vrat
 Mali elastični kaiš, 2x
 Veliki elastični kaiš, 2x
 Srednji elastični kaiš, 2x
 Kabl za konekciju, 2x
 Kontroler
 Indikator nivoa baterije
 Numerički displej
 Indikator moda, 4x
 Taster za operaciju ()
 Taster za nivo energije ()
 LED svetla za operaciju
 Port za punjenje
 Hub
 USB kabl

2. Opšte informacije



2.1 Čitanje i čuvanje priručnika za korisnika

Ovaj priručnik za korisnika prati ovu Dual LED Masku (u daljem tekstu "proizvod") i sadrži važne informacije o podešavanju i rukovanju. Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik za korisnika. Ovo se naročito odnosi na uputstva za bezbednost. Nepridržavanje ovih uputstava može dovesti do ličnih povreda ili oštećenja proizvoda. Priručnik za korisnika se zasniva na standardima i pravilima na snazi u Evropskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Kada ste u inostranstvu, morate se pridržavati i specifičnih smernica i zakona te zemlje. Čuvajte priručnik za korisnika za kasniju upotrebu. Obavezno uključite ovaj priručnik za korisnika kada proizvod prosleđujete trećim stranama.

2.2 Objašnjenje simbola

Sledeći simboli i signalne reči se koriste u ovom priručniku za korisnika, na proizvodu ili pakovanju.

UPOZROENJE!

Ovaj signalni simbol/reč označava opasnost sa umerenim rizikom, koja može dovesti do smrti ili teških povreda ako se ne izbegne.

NAPOMENA!

Ova signalna reč upozorava na moguća oštećenja imovine.



Ovaj signalni simbol vam pruža korisne dodatne informacije o rukovanju i upotrebi.



Pročitajte priručnik za korisnika.



Deklaracija usklađenosti:
Proizvodi označeni ovim simbolom ispunjavaju sve važeće odredbe Evropskog ekonomskog prostora.



Proizvod označen ovim simbolom je pogodan isključivo za kućnu upotrebu (suva unutrašnja klima). Jednosmerna struja

3 Bezbednost

3.1 Pravilno korišćenje

Proizvod je isključivo dizajniran za obnavljanje sjaja, elastičnosti i teksture vaše kože. Namenjen je samo za privatnu upotrebu i nije pogodan za komercijalne svrhe. Koristite proizvod samo kako je opisano u ovom priručniku za korisnika. Bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može dovesti do oštećenja imovine ili ličnih povreda. Proizvođač ne može biti odgovoran za štete ili povrede nastale nepravilnom ili pogrešnom upotrebom.

3.2 Bezbednosne nstrukcije

UPOZORENJE OD ELEKTRIČNOG UDARA

- Koristite proizvod samo sa priloženim USB kablom..
- Samo povežite USB kabl proizvoda na odgovarajući mrežni adapter (IEC/EN 60335)

sertifikovana SELV napajanja) povezan na lako dostupnu utičnicu, kako biste ga mogli brzo isključiti iz mreže u slučaju problema.

Ne koristite proizvod ako je oštećen ili ako je USB kabl defektan.

Ne otvarajte kućište; umesto toga, prepustite popravku kvalifikovanom stručnjaku.

Kontaktirajte tim za korisničku podršku za to. Odgovornost i zahtevi za garanciju se odriču u slučaju popravki koje je korisnik izvršio sam, nepravilnog povezivanja ili pogrešne upotrebe.

Samo delovi koji su u skladu sa originalnim podacima uređaja mogu se koristiti za popravke. Ovaj proizvod sadrži električne i mehaničke delove koji su esencijalni za zaštitu od izvora opasnosti.

Ne potopljavajte proizvod ili USB kabl u vodu ili druge tečnosti. Držite ih dalje od vode.

Već uvek isključite proizvod kada ga ne koristite, kada planirate da ga čistite ili u slučaju kvara. Uvek isključite USB kabl kada ne puniti proizvod.

Nikada ne dodirujte USB kabl mokrim ili vlažnim rukama.

Nikada ne ubacujte bilo kakve objekte u kućište.

Održavajte sve delove proizvoda dalje od otvorenog plamena i vrućih površina.

Položite USB kabl tako da ne predstavlja opasnost od spoticanja.

Ne povlačite USB kabl iz mrežnog adaptera za kablom; uvek ga povlačite za priključak kabla.

Ne savijajte USB kabl i nemojte ga položiti preko oštih ivica.

- Koristite proizvod samo unutra.

Ne koristite proizvod dok se puni.



UPOZORENJE! RIZIK OD POVREDA!

- Proizvod može koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili koje nemaju iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili su obučene za sigurno korišćenje proizvoda i razumeju opasnosti koje sa sobom nosi. Deca ne smeju da se igraju sa proizvodom.
- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju da se vrše od strane dece. Držite decu dalje od proizvoda i USB kabla.
- Proizvod ne sme koristiti trudnice, deca, osobe sa epilepsijom, pacijenti sa problemima štitne žlezde, osobe koje koriste lekove za štitnu žlezdu, osobe koje su fotoalergične ili koriste lekove za alergiju na svetlo.
- Proizvod ne sme koristiti kod kožnih bolesti, rana, trauma i postoperativnih rana.
- Ne koristite proizvod duže od 10 minuta po sesiji.
- Obratite se lekaru ako niste sigurni da li možete da koristite proizvod.
- Prestanite da koristite proizvod odmah ako osetite nelagodnost, razvijete bilo kakve abnormalne reakcije (kao što su svrab ili neugodna upala) ili ako vaša koža postane topla do tačke nelagodnosti.

- U slučaju zloupotrebe, tečnost može izaći iz baterije; izbegavajte kontakt sa njom. Tečnost koja izlazi iz baterije može izazvati iritacije ili opekotine.
- Ako tečnost baterije dođe u kontakt sa kožom, očima ili sluzokožom, odmah isperite pogođena mesta čistom vodom. Ako je potrebno, konsultujte se sa lekarom.
Bateriju se ne sme rastavljati, kratko spajati ili bacati u vatru.

OBAVEŠTENJE! RIZIK OD POVREDA!

- Držite proizvod dalje od otvorenog vatre, vrućih površina, visokih temperatura ili uticaja vremena (npr. kiša).
- Prestanite da koristite proizvod ako njegove delove pokazuju pukotine, lomove ili su deformisani. Samo zamenite oštećene delove odgovarajućim originalnim rezervnim delovima.

4 Dfcj YfU'dfc]nj cXU'] 'gUXf U'U'dU_YhU'

A 43H7×F 7@7! RIL ;= A 6 A ×F 7 7@3!

- Ako nestručno otvorite pakovanje oštrim nožem ili drugim oštrim predmetima, proizvod se može brzo oštetiti. Budite veoma pažljivi pri otvaranju.
1. Izvadite proizvod iz pakovanja.
 2. Proverite da li su svi delovi uključeni (pogledajte Fig. A).
 3. Proverite da li je proizvod ili pojedinačni delovi oštećeni. Ako je to slučaj, ne koristite proizvod. Kontaktirajte našu korisničku podršku.

5 Punjenje






- Punite proizvod potpuno pre prve upotrebe i kada je nivo baterije nizak.
- Kada je nivo baterije nizak, indikatori nivoa baterije trepere 3 puta pre nego što se proizvod automatski isključi. Ponovo napunite proizvod.
- Ako proizvod treba da se skladišti duži vremenski period, nivo baterije treba da se proveri i proizvod treba redovno da se puni. Proizvod ne može da se koristi tokom punjenja.

1. Uključite manji kraj USB kabla (slika 18) u port za punjenje (slika 16) kontrolera (slika 19.)
2. Uključite veći kraj USB kabla u USB port kompatibilnog USB napajanja (npr. USB adapter za napajanje).
3. Uključite USB adapter u mrežnu utičnicu za punjenje.
Punjenje počinje automatski. Proverite indikatore nivoa baterije 10 za napredak punjenja:
 - 1 indikator = 25% napunjeno
 - 2 indikatora = 50% napunjeno
 - 3 indikatora = 75% napunjeno
 - 4 indikatora = potpuno napunjeno
4. Kada je punjenje završeno, isključite USB adapter iz mrežne utičnice i odvojite USB kabl od porta za punjenje.

6 Sklapanje

Sastavite proizvod na sledeći način (videti **Fig. B**):

1. Otvorite kopče sa kukica i petlji na elastičnim kaiševima.
2. Vodiće se kopče sa kukica kroz otvore na maski za lice 1 i maski za vrat 2.

Mali elastični kaiš 	Mali gornji otvori maske za lice
Veliki elastični kaiš 	Veliki bočni otvori maske za lice
Srednji elastični kaiš 	Bočni otvori maske za vrat

4. Zatvorite kopče sa kukica da osigurate elastične kaiševe na maskama.

5. Povežite jedan kraj drugog kabla za konekciju sa konektorom maske za vrat 4 i drugi kraj sa hubom.
6. Povežite hub na port za punjenje 16 kontrolera 9.

i Maska za lice i maska za vrat mogu se koristiti zasebno. U tom slučaju, direktno povežite masku sa kontrolerom putem kabla za konekciju.

7 Operacije

! UPOZORENJE! RIZIK OD POVREDA

- Obratite pažnju da lampice trepere sve brže kada uključujete proizvod. Za zaštitu očiju, prvo stavite maske preko lica i vrata pre nego što ih uključite.
- Kada pređete na drugi režim, lampice ponovo trepere sa povećanom brzinom da bi označile početak novog režima.
- Ne koristite proizvod duže od 10 minuta po sesiji.

i Očistite sve delove proizvoda pre prve upotrebe kao što je opisano u poglavlju "Čišćenje".

7.1 Priprema

1. Punite proizvod potpuno i pravilno pričvrstite elastične kaiševe (pogledajte poglavlja "Punjenje" i "Sastavljanje").
2. Dobro očistite i osušite lice i vrat. Uverite se da su bez šminke ili prljavštine.
3. Sedite ili ležite i stavite maske preko lica i vrata.
4. Upotrebite kopče sa kukicama na krajevima elastičnih kaiševa da udobno postavite masku za lice 1 i masku za vrat 2 na lice i vrat.
5. Mali elastični kaiševi 5 trebaju biti zatvoreni na vrhu glave, a veliki elastični kaiševi 6 zatvoreni na zadnjem delu glave. Srednji elastični kaiševi 7 trebaju biti zatvoreni na zadnjem delu vrata.

7.2 Izvođenje sesije

1. Pritisnite i držite dugme za operaciju (⏻) da uključite proizvod.
Lampice za operaciju 15 se pale kada se proizvod uključi. Podrazumevano, proizvod prelazi u režim "M1" na nivou energije 1.
Odgovarajuća lampica indikatora režima 12 se pali.
Trenutni nivo energije kratko se prikazuje na numeričkom displeju 11 pre nego što se promeni i pokaže preostalo vreme rada.
2. Ako je potrebno, pritisnite dugme za operaciju (⏻) da odaberete drugi režim i dugme za nivo energije (⏻) 14 da odaberete drugi nivo energije (1-3), respektivno.

Režim	LED	Najbolje za
M1	Crvena + Tamno crvena + Blizu infracrvena	Smanjuje fine linije i bore, rekonstruiše kolagenske i elastinske niti i pomaže u poboljšanju mikro-cirkulacija
M2	Tamnocrvena + Blizu infracrvena	Za sjajniju i glađu kožu
M3	Crvena + Tamnocrvena	Izbalansira lučenje sebuma i smiruje osetljivu kožu
M4	Plava	Akcelerira smanjenje crvenila povezanog sa aknom za ujednačeniji ton kože

3. Sesija počinje i traje 10 minuta za režime M1, M2 i M3, i 3 minuta za režim M4. Proizvod se automatski isključi nakon unapred definisanog vremena rada.
Takođe možete pritisnuti i držati dugme za operaciju (⏻) da isključite proizvod u bilo kojem trenutku.
4. Nakon sesije, uklonite maske i nanesite serum i/ili dnevnu/noćnu kremu na lice i vrat.
5. Dobro očistite proizvod nakon upotrebe (pogledajte poglavlje "Čišćenje").

8 Rezime

Ako proizvod koristite prvi put, koristite ga 3-5 puta nedeljno u prva 4 nedelje. Nakon toga, koristite proizvod 1-2 puta nedeljno.

9 Čišćenje

RS

! UPOZORENJE! RIZIK OD EL. UDARA

- Uvek isključite proizvod iz izvora napajanja pre čišćenja.

OBAVEŠTENJE! RIZIK OD OŠTEĆENJA!

- Ne koristite agresivne čistače, četke sa metalnim vlaknima, ili oštre ili metalne alate za čišćenje kao što su noževi, tvrdi strugači i slično.
- Ne koristite vruću vodu za čišćenje.
- UKombinirajte maske 1 / 2 vlažnom krpom ili vlažnom krpom na bazi vode. Zatim ih osušite suvom krpom.

10 Skladištenje

Svi delove moraju biti potpuno suvi pre skladištenja.

- Skladištite proizvod na čistom i suvom mestu, izbegavajući toplotu i direktno sunce.
- Skladištite proizvod tako da bude nedostupan deci.
- Za najbolju zaštitu, skladištite proizvod u originalnom pakovanju.

11 Rešavanje problema

Neki problemi mogu biti izazvani manjim kvarovima koje možete sami rešiti. Da biste to uradili, sledite uputstva u sledećoj tabeli. Ako se problem i dalje ne može rešiti, kontaktirajte korisničku podršku. Ne popravljajte proizvod sami.

Greške	Mogući uzroci i rešenje
Proizvod ne radi.	- Proverite da li je proizvod pravilno napunjen. - Proverite da proizvod nije povezan sa USB napajanjem. Proizvod ne radi tokom punjenja.
Proizvod se ne puni.	- Proverite da je USB kabl 18 sigurno povezan između porta za punjenje 16 i USB napajanja.

12 Tehnički podaci

Model	FAC04
Nominalni ulaz:	5 V === 1 A
Radni napon	3.7 V
kapacitet Baterije	2,000 mAh, 7.4 Wh (lithium)
Broj LED osvetljenja	76 (face mask) 36 (neck mask)
Težina:	3 (kontroler) 200 g (maska za lice) 80 g (maska za vrat) 94 g (kontroler)
Dimenzije (L × W × H):	381 × 190.5 × 10 mm (maska za lice) 237 × 108 × 7.5 mm (maska za vrat) 133.5 × 50 × 35 mm (kontroler)
Materijali:	Silicone (maska za vrat i lice) ABS (kontroler)
Radna temperatura:	-10–40 °C

13 Odlaganje

13.1 Odlaganje pakovanja



Sortirajte pakovanje pre odlaganja. Odložite karton u uslugu reciklaže papira, a omotače sa odgovarajućom službom za sakupljanje.

13.2 Odlaganje proizvoda

(Akceptuje se u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemima odvojene sakupljanja reciklabilnih materijala)



Stari aparati ne smeju se odlagati u kućni otpad! Ako proizvod ne može više da se koristi, odložite ga u skladu sa važećim propisima u vašem gradu ili okrugu.

Ovo osigurava da se stari aparati recikliraju profesionalno i da se izbegnu negativni uticaji na životnu sredinu.

Baterije i punjive baterije se ne smeju odlagati sa kućnim otpadom!



Kao krajnji korisnik, zakonom ste obavezni da sve baterije i punjive baterije, bilo da sadrže štetne supstance* ili ne, donesete na sakupljačko mesto koje vodi lokalna vlast ili kod prodavca, kako bi se mogle odložiti na ekološki prihvatljiv način.

Donesite ceo proizvod (uključujući punjivu bateriju) na vaše sakupljačko mesto i uverite se da je baterija prazna!

* označeno sa: Cd = kadmijum, Hg = živa, Pb = olovo

14 Garancija

Ovaj proizvod je pokriven garancijom od 2 godine prema evropskim propisima i zakonima. Obim garancije na ovaj proizvod je ograničen na tehničke defekte uzrokovane neispravnim proizvodnim procesima. Ukoliko želite da potražite garanciju, obavezno kontaktirajte našu korisničku podršku za instrukcije. Moguće je da će moći da reše vaš problem bez potrebe za vraćanjem proizvoda u prodavnicu ili naš servisni centar. Naša korisnička podrška je uvek spremna da vam pomogne!

15 Podrška kupcima

Za više informacija o Silk'n proizvodima, posetite vaš regionalni Silk'n web sajt: www.silkn.eu. Ako je uređaj oštećen, defektan, potreban je popravak ili vam je potrebna naša pomoć, molimo kontaktirajte najbliži Silk'n servisni centar. Ovaj priručnik je takođe dostupan za preuzimanje u PDF formatu na: www.silkn.eu.

Broj servisa: 0906-2130009

Email: customercareuk@silkn.eu

2307_011_MULT1



Silk'n[®]

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam
The Netherlands

Silk'n Srbija:
www.silkn.rs • info@silkn.rs

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House
Market Road, Wickford,
Essex, SS12 0FD
United Kingdom



© 2024 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.